

Easy•Touch® HealthPro™

Glucose Monitoring System

Quick Reference Guide

This guide is intended to be used as a quick reference to the EasyTouch® HealthPro™ User Manual. Please read the complete manual before using the EasyTouch® HealthPro™ Glucose Monitoring System.

Display Messages



Meter may be defective. Reboot meter with new batteries.



Test strip may be contaminated or used. Retest with new test strip.



Insufficient amount of sample blood placed on the test strip. Retest with new test strip.



Inadequate sample of blood or control solution on test strip. Retest with new test strip.



Blood sample is placed on the test strip before the symbol for blood blinks.



Color bars on the back of strip are dirty, bad or there is too much light. Retest with new test strip.



Ambient temperature is less than 50°F (10°C). Wait 10 minutes and retest with new test strip.



Ambient temperature is over 104°F (40°C). Wait 10 minutes and retest with new test strip.



Test result is lower than 20mg/dl. Repeat test to ensure accurate results.



Test result is higher than 600mg/dl. Repeat test to ensure accurate results.


Please refer to pages 38-40 in the [EasyTouch® HealthPro™ User Manual](#) for additional information.

Detailed instructions on setting up your meter with the date, time and number of days for test averaging can be found in the EasyTouch® HealthPro™ User Manual.

Performing a Test

STEP 1




Insert a test strip firmly into the test port. The meter will automatically turn on and read the test strip code. A blinking test strip “” will appear when the meter is ready for testing.

STEP 2



Place blood sample onto the end of the test strip. When the test strip has collected the blood sample (0.5µL), the meter will beep and automatically start counting down.

STEP 3

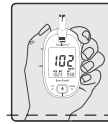




After 5 seconds, your blood glucose result will appear on the display and will automatically be stored into the meter's memory. The meter will automatically turn off.

Reviewing Your Results

The EasyTouch® HealthPro™ Meter stores up to 365 test results in its built-in memory, along with the average sugar level for the number of days you preset the glucose test meter to calculate.




STEP 1



To retrieve your test results, press and release the “” button. Most recent results appears first. Press the “” and “” buttons to navigate through your previous test results.

STEP 2

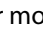

To retrieve your test averaging, press and release the “” button when viewing your most recent test result. To switch between day-averaging presets, press the “” and “” buttons.

For [Questions](#) or [Comments](#), call MHC Customer Support at (877) 358-4342, Monday thru Friday, 9am to 5pm EST.

TE-081313.8

Easy•Touch® HealthPro™

Glucose Monitoring System

Guía de Referencia Rápida

El propósito de esta guía es para usarla como una referencia rápida del manual de usuario de EasyTouch® HealthPro™. Por favor consulte el manual completo antes de usar el EasyTouch® HealthPro™ monitor de glucosa.

Mostrar Mensajes



El medidor puede ser defectuoso. Reinicie el medidor con baterías nuevas.



La tira de prueba puede estar contaminada o usada. Vuelva a probar con una tira nueva.



Insuficiente cantidad de muestra de sangre colocada en la tira. Vuelva a probar con una tira nueva.



Muestra inadecuada de sangre o solución de control en la tira de prueba. Vuelva a probar con una tira nueva.



Muestra de sangre se coloca en la tira de prueba antes de que el símbolo de sangre parpadea.



La barra de color esta sucia, no esta buena o hay mucha luz. Vuelva a probar con una tira nueva.



Temperatura ambiente es menos de 50°F(10°C). Espere 10 minutos y vuelva a probar con una tira nueva.



Temperatura ambiente es mas de 104°F (40°C). Espere 10 minutos y vuelva a probar con una tira nueva.



Resultado de la prueba es menor que 20mg/dl. Repita la prueba para asegurar resultados precisos.



Resultado de la prueba es mas alto que 600mg/dl. Repita la prueba para asegurar resultados precisos.

Por favor consulte las paginas 38-40 en el manual usuario de **EasyTouch® HealthPro™** para información adicional.

Instrucciones detalladas sobre como configurar su medidor con la fecha, hora y el número de días para calcular la prueba se puede encontrar en el manual de usuario del Easy Touch® Health Pro™.

Hacer una Prueba

PASO 1




Insertar una tira firmemente en el puerto de prueba. El medidor se prenderá automáticamente y leerá el código de la tira. Una tira parpadeando aparecerá "Er 1" cuando el medidor está listo para la prueba.

PASO 2



Coloque una muestra de sangre al final de la tira. Cuando la tira de prueba ha recogido la muestra de sangre (0.5µL), el medidor emitirá un pitido y comenzara automáticamente una cuenta regresiva.

PASO 3

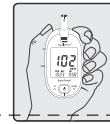

Despues de 5 segundos, su resultado de glucosa de sangre aparecerá en la pantalla y se almacenara automáticamente en la memoria del medidor. El medidor se apagará automáticamente después.

Revisar los Resultados

El medidor EasyTouch® HealthPro™ almacena hasta 365 resultados de prueba en la memoria incorporada, junto con el nivel promedio de azúcar, para el número de días que predetermina el medidor de glucosa para el cálculo.

PASO 1



Para recuperar los resultados de la prueba, presione y suelte el "⏏" botón. Los resultados más recientes aparecerán primero. Presione el botón "▲" y "▼" para navegar a través de los resultados anteriores.

PASO 2



Para recuperar los promedios de las pruebas, presione y suelte el botón "▲" cuando viendo los resultados más recientes. Para cambiar entre los días de promedio preestablecidos, presione el botón "▲" y "▼".

Para **Preguntas** o **Comentarios**, llame a MHC servicio al cliente al (877) 358-4342, Lunes a Viernes, 9am a 5pm EST.

TE-081313.8